

American Health Gate

مشارط وخز آمنة معقمة للاستخدام مرة واحدة

AHG-IIA

دليل التعليمات



٣	وصف المنتج
٣	الغرض من الاستخدام
٣	دواعي الاستعمال
٤	المستخدمون المستهدفون وفئات المرضى
٤	موانع الاستعمال
٤	تحذيرات واحتياطات
٥	تعليمات الاستخدام
٦	ظروف التخزين
٦	مدة الصلاحية
٧	فهرس الرموز

مشارط AHG-IIA الآمنة والمعقمة للاستخدام مرة واحدة

إن مشارط AHG الآمن والمعقم (موديل: AHG-IIA) هو جهاز طبي معقم مخصص للاستخدام لمرة واحدة فقط لجمع عينات الدم الشعيري. يتميز بإبرة محملة مسبقاً تتسحب تلقائياً بعد التنشيط لتقليل مخاطر الإصابة بوخز الإبر ومنع إعادة الاستخدام.

المواصفات:

- القياس (Gauge): ٢٨G
- عمق الاختراق: ١,٨ ملم
- قطر الإبرة: ٠,٣٦ ملم
- طريقة التعقيم: التعقيم بالإشعاع

الغرض من الاستخدام

جهاز AHG-IIA مخصص لوخز الجلد (مثل طرف الإصبع أو أى موقع آخر مناسب لأخذ عينات الدم الشعيري) للحصول على حجم صغير من الدم الشعيري الكامل لإجراء فحوصات التشخيص المختبرى (مثل مراقبة مستوى الجلوكوز فى الدم).
الجهاز مخصص للاستخدام لمريض واحد فقط.

دواعى الاستعمال

يُستخدم لجمع عينات الدم الشعيري الكامل لأغراض الفحص التشخيصى، بما فى ذلك مراقبة المؤشرات الفسيولوجية مثل مستويات السكر فى الدم.

هذا الجهاز مناسب لـ:

- ممارسي الرعاية الصحية في البيئات السريرية أو المخبرية.
- المستخدمين العاديين الذين يجرون الاختبارات الذاتية في المنزل.


موانع الاستعمال

- لا يُستخدم في المناطق التي تعاني من عدوى، أو وذمة (تورم)، أو تضرر في سلامة الجلد.
- يُستخدم بحذر مع المرضى الذين يعانون من اضطرابات النزيف أو الذين يتلقون علاجاً بمضادات التخثر.
- غير مخصص للاستخدام مع الرضع إلا تحت توجيه ممارس رعاية صحية.

تحذيرات واحتياطات


- للاستخدام مرة واحدة فقط. لا تقم بإعادة الاستخدام أو إعادة التعقيم.
- لا يُستخدم بعد تاريخ انتهاء الصلاحية الموضح على العبوة.
- لا يُستخدم في حال فقدان أو تلف الغطاء الواقي، أو إذا كانت عبوة التعقيم مفتوحة أو تالفة.
- اغسل يديك جيداً بالصابون والماء الدافئ قبل الاستخدام.
- استخدم مشراطاً جديداً لكل عملية وخز.
- المشارط المستخدمة تعتبر نفايات حبيوية خطيرة محتملة.
- الاستخدام غير الصحيح قد يزيد من خطر العدوى أو الإصابة.
- يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- في حالة وقوع حادث خطير، يرجى إبلاغ الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

ملاحظة: اغسل يديك بالماء والصابون وجففهما جيداً قبل وبعد الاستخدام.

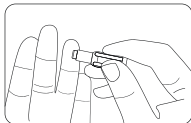


الخطوة ٢ - الوضعية:

ضع فتحة المشراط بإحكام على موقع الوخز.

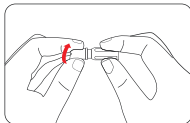


الخطوة ١ - التحضير:

قم بلف الغطاء الواقي لفكّه. لا تسحبه بشكل مستقيم.

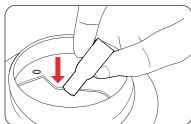

الخطوة ٣ - التنشيط:

تخلص فوراً من الجهاز المستخدم في حاوية مخصصة للأدوات الحادة المعتمدة.

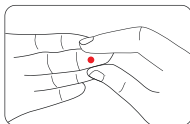

الخطوة ٤ - التخلص من الجهاز:

اضغط على الجهاز للأسفل بقوة. سوف تخرج الإبرة وتنسحب تلقائياً.

⚠ خطر بيولوجي محتمل

المشارط المستخدمة قد تكون ملوثة بالدم. يجب التعامل معها والتخلص منها وفقاً للوائح المحلية الخاصة بالأدوات الحادة والنفايات الحيوية الخطرة.

ظروف التخزين

- يُحفظ في مكان بارد وجاف.
- لا يُعرض لدرجات حرارة تزيد عن ٣٠ درجة مئوية (٨٦ درجة فهرنهايت).
- يُحفظ بعيداً عن الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة.

مدة الصلاحية

مدة الصلاحية: ٥ سنوات من تاريخ التصنيع، إذا تم تخزينه تحت الظروف الموصى بها. لا يُستخدم بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

التحذيرات والاحتياطات

- اقرأ التعليمات واتبعها بعناية قبل الاستخدام.
- يُستخدم فقط ضمن تاريخ انتهاء الصلاحية الموضح على العبوة.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان الغطاء الواقي مفقوداً أو تالفاً.
- يجب إبلاغ الشركة المصنعة والسلطة المختصة في دولتك (في الاتحاد الأوروبي) عن أي حوادث خطيرة تقع.
- تخلص من المشارط المستخدمة وفقاً للوائح المحلية لمنع حدوث إصابات أو تلوث.
- يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- للاستخدام مرة واحدة فقط؛ يحظر إعادة استخدامه أو إعادة تعقيمه.
- الاستخدام غير السليم قد يزيد من خطر انتقال العدوى.

قد تظهر الرموز التالية على العبوة وفي تعليمات الاستخدام هذه.

رقم الدفعة		راجع تعليمات الاستخدام	
رقم الكتالوج		لا تعيد الاستخدام	
تاريخ التصنيع		الشركة المصنعة	
تاريخ انتهاء الصلاحية		معقم باستخدام الإشعاع	
احفظ بعيداً عن أشعة الشمس		جهاز طبي	
احفظ جافاً		لا تعيد التعقيم	
تحذير		المستورد	
علامة CE		معرف الجهاز الفريد	
		الممثل المعتمد في الاتحاد الأوروبي	
		تخلص منه وفقاً للأنظمة المحلية	



المكتب الرئيسي:

American Health Gate LLC

٤٥٠ ألاسكان واى إس.، جناح ٢٠٠، سياتل، واشنطن ٩٨١٠٤،
الولايات المتحدة الأمريكية

www.americanhealthgate.com