

American Health Gate

一次性使用无菌采血针

AHG-IIA

使用说明书



目录

产品描述	3
性能	3
预期用途	3
预期用户	4
预期患者群体	4
适应症	4
禁忌症	4
使用说明	5
储存说明	6
保质期	6
警告和注意事项	6
特点和优势	6
符号索引	7

产品描述

AHG- IIA 一次性使用无菌采血针

AHG一次性无菌安全采血针是一种无菌、一次性使用的医疗器械，专为毛细血管采血设计。它配备了预装针头，使用后自动回缩，防止重复使用，确保用户安全。

规格：

- 针规：28G
- 颜色：透明
- 穿刺深度：1.8毫米
- 针直径：0.36毫米

性能

该设备采用辐照灭菌，确保无菌和安全。仅限一次性使用，消除交叉污染或感染风险。

预期用途

AHG一次性无菌安全采血针用于刺破皮肤（例如指尖或批准的替代部位），以获取用于诊断目的的小量毛细血管血样，如血糖监测或其他需要少量血液的测试。

预期用户

该设备适用于：

临床或实验室环境中的医疗专业人员。

在医疗专业人员指导下，在家中进行血糖或其他诊断测试自我监测的个人。

预期患者群体

该设备专为需要毛细血管血样进行诊断的患者设计，包括管理糖尿病或按医疗专业人员处方进行常规血液检查的患者。

适应症

采血针适用于获取毛细血管血样进行诊断测试，如血糖监测或其他需要一两滴血的程序。

禁忌症


- 对有凝血障碍或影响出血的疾病患者需谨慎使用。
- 如对安全使用有疑问，请咨询医疗专业人员。

使用说明

注意：使用前用温肥皂水洗手并彻底擦干。


1. 准备采血针：

牢固握住设备，扭下保护帽。
不要拉或强行取下保护帽，以免损坏采血针。

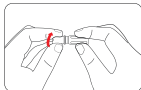

2. 定位采血针：

将采血针尖轻轻按压在采血部位（例如指尖或批准的替代部位）。

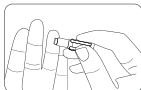

3. 激活采血针：

用力按下以刺破皮肤并收集血样。



4. 处理采血针：

立即将使用过的采血针丢弃到指定锐器容器中，遵守当地法规。



潜在生物危害

将使用过的试纸条作为医疗废物处理。

产品储存条件

- 储存于凉爽、干燥、通风良好的地方。
- 远离阳光直射、潮湿和腐蚀性物质。
- 不要储存在30度以上这条。

保质期

在推荐储存条件下，自制造之日起五年内保持无菌和有效。

警告和注意事项

- 使用前仔细阅读并遵循说明。
- 仅在标示的有效期内使用。
- 如果保护帽缺失或损坏，请勿使用。
- 向制造商和您所在欧盟成员国的主管当局报告严重事件。
- 按照当地法规处理使用过的采血针，以防止伤害或污染。
- 置于儿童无法触及的地方。
- 仅限一次性使用；不得重复使用或再次灭菌。

特点和优势

- 一次性设计：防止感染和交叉污染。
- 无菌：通过辐照预灭菌，确保安全和清洁。
- 人体工学：易于使用，握感舒适。
- 自动回缩：使用后针头自动回缩，提升安全性。

符号索引

	批次代码		参考使用说明
	目录编号		不可重复使用
	制造日期		制造商
	使用截止日期		辐照灭菌
	怕晒		医疗器械
	保持干燥		不可再次灭菌
	警告		进口商
	CE标志		唯一设备标识
	欧洲共同体授权代表		
	按照当地有关处置和回收的相关法律处置物品。		



制造用于：

美国海尔斯盖特有限公司 «**American Health Gate LLC**»

美国华盛顿州西雅图市南阿拉斯加路450号 · 200室 · 邮编：98104

Website: www.americanhealthgate.com