

# American Health Gate

## ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ЛАНЦЕТЫ БЕЗОПАСНОСТИ АНГ-IIA

Руководство по эксплуатации



## Оглавление

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Описание продукта .....                      | 3 |
| Характеристики .....                         | 3 |
| Назначение .....                             | 3 |
| Целевые пользователи .....                   | 4 |
| Целевая популяция пациентов .....            | 4 |
| Показания .....                              | 4 |
| Противопоказания .....                       | 4 |
| Инструкции по использованию .....            | 5 |
| Инструкции по хранению .....                 | 6 |
| Срок годности .....                          | 6 |
| Предупреждения и меры предосторожности ..... | 6 |
| Особенности и преимущества .....             | 7 |
| Указатель символов .....                     | 7 |

## Описание продукта

### АНГ- IIA ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ЛАНЦЕТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Одноразовый стерильный ланцет безопасности АНГ — это стерильное медицинское изделие одноразового использования, предназначенное для забора капиллярной крови. Он оснащен предварительно заряженной иглой, которая автоматически втягивается после использования, чтобы предотвратить повторное использование и обеспечить безопасность пользователя.

#### Характеристики:

- Калибр: 28G
- Цвет: Прозрачный
- Глубина прокола: 1,8 мм
- Диаметр иглы: 0,36 мм

## Характеристики

Устройство стерилизовано с помощью облучения, что гарантирует стерильность и безопасность. Предназначено только для одноразового использования, что исключает риск перекрестного заражения или инфекции.

## Назначение

Одноразовый стерильный ланцет безопасности АНГ предназначен для прокалывания кожи (например, кончика пальца или одобренного альтернативного участка) для получения небольшого образца капиллярной крови в диагностических целях, таких как мониторинг уровня глюкозы в крови или другие тесты, требующие минимального объема крови.

## **Целевые пользователи**

### **Устройство подходит для:**

- Медицинских работников в клинических или лабораторных условиях.
- Лиц, проводящих самоконтроль уровня глюкозы в крови или другие диагностические тесты дома под руководством медицинского работника.

## **Целевая популяция пациентов**

Устройство предназначено для пациентов, которым требуется забор капиллярной крови в диагностических целях, включая тех, кто управляет диабетом или проходит регулярные анализы крови по назначению медицинских работников.

## **Показания**

Ланцет показан для получения образцов капиллярной крови для диагностических тестов, таких как мониторинг уровня глюкозы в крови или другие процедуры, требующие одной или двух капель крови.

## **Противопоказания**


- Использовать с осторожностью у лиц с нарушениями свертываемости крови или состояниями, влияющими на кровотечение.
- Проконсультируйтесь с медицинским работником в случае неуверенности в безопасном использовании.

## Инструкции по использованию

**Примечание:** Вымойте руки теплой водой с мылом и тщательно высушите перед использованием.


### 1. Подготовка ланцета:

- Крепко держите устройство и поверните, чтобы снять защитный колпачок.
- Не тяните и не прикладывайте усилий к колпачку, чтобы не повредить ланцет.

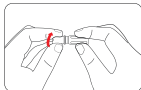

### 2. Позиционирование ланцета:

- Осторожно прижмите кончик ланцета к месту забора крови (например, кончику пальца или одобренному альтернативному участку).

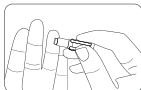

### 3. Активация ланцета:

- Сильно нажмите, чтобы проколоть кожу и собрать образец крови.



### 4. Утилизация ланцета:

- Немедленно утилизируйте использованный ланцет в предназначенный для острых предметов контейнер в соответствии с местными правилами.



**Потенциальная биологическая опасность**

Утилизируйте использованные тест-полоски как медицинские отходы.

## **Инструкции по хранению**

- Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте.
- Беречь от прямых солнечных лучей, влаги и коррозионных веществ.
- Не хранить при температуре выше 30°C (86°F).

## **Срок годности**

Устройство остается стерильным и эффективным в течение пяти лет с даты изготовления при условии хранения в рекомендуемых условиях.

## **Предупреждения и меры предосторожности**

- Внимательно прочитайте и следуйте инструкциям перед использованием.
- Используйте только до указанной даты истечения срока годности.
- Не используйте, если защитный колпачок отсутствует или поврежден.
- Сообщайте о серьезных инцидентах производителю и компетентному органу вашего государства-члена ЕС.
- Утилизируйте использованные ланцеты в соответствии с местными правилами, чтобы предотвратить травмы или заражение.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Только для одноразового использования; не используйте повторно и не рестерилизуйте.

## Особенности и преимущества

- Одноразовая конструкция: Предотвращает инфекции и перекрестное заражение.
- Стерильность: Предварительно стерилизовано облучением, что обеспечивает безопасность и чистоту.
- Эргономичность: Простота в использовании с удобным захватом.
- Автоматическое втягивание: Повышает безопасность за счет втягивания иглы после использования.

## Указатель символов

|                                                                                    |                                                                                       |                                                                                   |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | Номер партии                                                                          |  | Прочитайте инструкции по использованию |
|    | Номер каталога                                                                        |  | Не использовать повторно               |
|    | Дата изготовления                                                                     |  | Производитель                          |
|    | Срок годности                                                                         |  | Стерилизовано с помощью облучения      |
|    | Беречь от солнечного света                                                            |  | Медицинское изделие                    |
|    | Хранить в сухом месте                                                                 |  | Не рестерилизовать                     |
|    | Осторожно                                                                             |  | Импортёр                               |
|    | Маркировка CE                                                                         |  | Уникальная идентификация устройства    |
|   | Уполномоченный представитель в ЕС                                                     |                                                                                   |                                        |
|  | Утилизируйте предметы в соответствии с местными законами об утилизации и переработке. |                                                                                   |                                        |



Изготовлено для:

**American Health Gate LLC**

Адрес: 450 Alaskan Way S., офис 200, Сиэтл,  
Вашингтон, 98104, США

Веб-сайт: [www.americanhealthgate.com](http://www.americanhealthgate.com)