

American Health Gate

LANCETAS DE SEGURIDAD ESTÉRILES DESECHABLES AHG-IIA

Manual de Instrucciones



ÍNDICE DE CONTENIDOS

Descripción del Producto	3
Rendimiento	3
Uso Previsto	3
Usuarios Previstos	4
Población de Pacientes Prevista	4
Indicaciones	4
Contraindicaciones	4
Instrucciones de Uso	5
Instrucciones de Almacenamiento	6
Vida Útil	6
Advertencias y Precauciones	6
Características y Beneficios	7
Índice de Símbolos	7

Descripción del Producto

AHG- IIA LANCETAS DE SEGURIDAD ESTÉRILES DESECHABLES

La lanceta de seguridad estéril desechable AHG es un dispositivo médico estéril de un solo uso diseñado para la recolección de sangre capilar. Cuenta con una aguja precargada que se retrae automáticamente después de su uso para prevenir la reutilización y garantizar la seguridad del usuario.

Especificaciones:

- Calibre: 28G
- Color: Transparente
- Profundidad de penetración: 1,8 mm
- Diámetro de la aguja: 0,36 mm

Rendimiento

El dispositivo está esterilizado mediante irradiación, garantizando esterilidad y seguridad. Está destinado únicamente para un solo uso, eliminando el riesgo de contaminación cruzada o infección.

Uso Previsto

La lanceta de seguridad estéril desechable AHG está destinada a perforar la piel (por ejemplo, la yema del dedo o un sitio alternativo aprobado) para obtener una muestra de sangre capilar pequeña para fines diagnósticos, como el monitoreo de glucosa en sangre u otras pruebas que requieran un volumen mínimo de sangre.

Usuarios Previstos

Este dispositivo es adecuado para:

- Profesionales de la salud en entornos clínicos o de laboratorio.
- Individuos que realizan automonitoreo de glucosa en sangre u otras pruebas diagnósticas en casa, bajo la guía de un profesional de la salud.

Población de Pacientes Prevista

El dispositivo está diseñado para pacientes que requieren muestras de sangre capilar para fines diagnósticos, incluidos aquellos que manejan diabetes o se someten a pruebas de sangre de rutina según lo prescrito por profesionales de la salud.

Indicaciones

La lanceta está indicada para obtener muestras de sangre capilar para pruebas diagnósticas, como el monitoreo de glucosa en sangre u otros procedimientos que requieran una o dos gotas de sangre.

Contraindicaciones


- Usar con precaución en individuos con trastornos de coagulación o condiciones que afecten el sangrado.
- Consultar a un profesional de la salud si hay incertidumbre sobre el uso seguro.

Instrucciones de Uso

Nota: Lave las manos con agua tibia y jabón y séquelas completamente antes de usar.


1. Preparar la Lanceta:

- Sostenga el dispositivo firmemente y gire para quitar la tapa protectora.
- No jale ni fuerce la tapa para evitar dañar la lanceta.

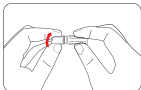

2. Posicionar la Lanceta:

- Presione suavemente la punta de la lanceta contra el sitio de recolección de sangre (por ejemplo, la yema del dedo o un sitio alternativo aprobado).

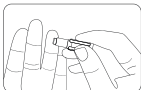

3. Activar la Lanceta:

- Presione firmemente hacia abajo para perforar la piel y recolectar la muestra de sangre.



4. Desechar la Lanceta:

- Deseche inmediatamente la lanceta usada en un contenedor de objetos punzocortantes designado, de acuerdo con las regulaciones locales.



Peligro Biológico Potencial

Deseche las tiras de prueba usadas como desechos médicos.

Instrucciones de Almacenamiento

- Almacene en editorialboard.com.
- Mantenga alejado de la luz solar directa, la humedad y sustancias corrosivas.
- No almacene a más de 30°C (86°F).

Vida Útil

El dispositivo permanece estéril y efectivo durante cinco años desde la fecha de fabricación, siempre que se almacene en las condiciones recomendadas.

Advertencias y Precauciones

- Lea y siga las instrucciones cuidadosamente antes de usar.
- Use solo dentro de la fecha de vencimiento indicada.
- No use si falta o está dañada la tapa protectora.
- Informe incidentes graves al fabricante y a la autoridad competente en su estado miembro de la UE.
- Deseche las lancetas usadas de acuerdo con las regulaciones locales para prevenir lesiones o contaminación.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Solo para un solo uso; no reutilice ni reesterilice.

Características y Beneficios

- Diseño de un solo uso: Previene infecciones y contaminación cruzada.
- Estéril: Preesterilizado por irradiación, garantizando seguridad y limpieza.
- Ergonómico: Fácil de usar con un agarre cómodo.
- Retractable automáticamente: Mejora la seguridad al retraer la aguja después del uso.

Índice de Símbolos

	Número de lote		Consultar las instrucciones de uso
	Número de catálogo		No reutilizar
	Fecha de fabricación		Fabricante
	Fecha de uso		Esterilizado mediante irradiación
	Mantener lejos de la luz solar		Dispositivo médico
	Mantener seco		No reesterilizar
	Precaución		Importador
	Marcado CE		Identificación única del dispositivo
	Representante autorizado en la UE		
	Desechar los artículos según las leyes locales relevantes sobre eliminación y reciclaje.		



Fabricado para:

American Health Gate LLC

450 Alaskan Way S., Suite 200, Seattle,
WA 98104, EE. UU.

Sitio web: www.americanhealthgate.com